

Sistema HOLTER 2/3/12H 7D (Bluetooth)



 Bluetooth™

CARDIOSPY



SISTEMI HOLTER (BLUETOOTH) 1-2-3-12 CANALI ECG

EC-12H



- Registrazione ECG completa di 24-48-72 ore
- 1, 2, 3, Ch indipendenti - o 12 canali
- Compatto: (53*67,5*18,5) mm , Leggero: ~50gr.
- Display LCD
- Comunicazione con Pc Wireless (Bluetooth)
- Analisi Pacemaker su canale indipendente
- Pulsante evento paziente
- Accelerometro 3D per la rilevazione del movimento
- Filtri efficaci per disturbi rumore, muscolare e linea di base.
- Rapida ed Efficace Analisi Automatica
- Grafici e Tabelle a Colori codificati
- HR e Tendenze ST
- Calcola ST, QT, AF, HRV, HRT, MICROV-TWA
- Vari editing e Funzioni di Stampa
- Utilizzo in rete LAN e WEB



EC-1/2/3-12 CH



Con i sistemi Holter ECG della Labtech è possibile effettuare registrazioni di 1, 2, 3 o 12 canali a seconda del paziente e del tipo di cavo utilizzato dal registratore, da 24 ore a 7 giorni. Il Software **Cardiospy®** fornisce un'analisi di registrazione ECG di ottima qualità. L'efficace valutazione automatica e le funzioni di editing forniscono valutazioni con quasi 100% di precisione nel più breve tempo possibile. Il programma esegue l'analisi del ritmo, ST, QT, AF, HRV nel dominio del tempo e della frequenza, e calcola pure i parametri HRT e microV-TWA. Il nostro software è altamente user-friendly: offre un'ampia gamma di report di editing e opzioni di stampa, è adatto per l'utilizzo in rete LAN e fornisce una vasta gamma di lingue da scegliere.

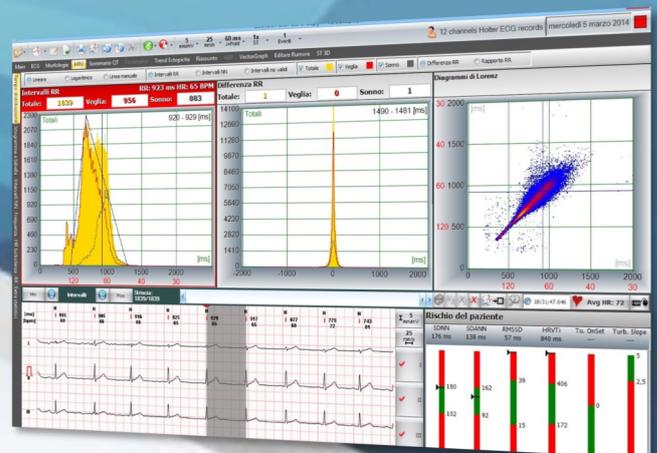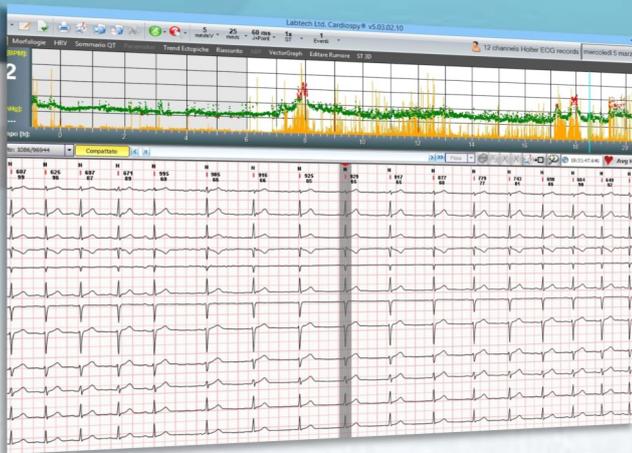

Distribuito da:



4. Vág street Debrecen 4031 Ungheria

Tel: + 36-52-310-128 Fax: + 36-52-412-023

medical@labtech.hu www.labtech.hu

Distributore Italia
INFOMEDICAL srl

Via G. Puccini, 48 - 90144 Palermo

Tel. + 39 091 6814699; Fax: + 39 091 6834937

info@ismad.it www.ismad.it